

# INDICADOR QUÍMICO BOWIE-DICK PAQUETE DE PRUEBA

El indicador químico Bowie-Dick paquete de prueba es un dispositivo utilizado en autoclaves o esterilizadores de vapor para verificar la efectividad del proceso de esterilización. Este tipo de indicador se utiliza principalmente en hospitales y entornos médicos donde la esterilización adecuada es crucial para prevenir infecciones.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- VIDA ÚTIL: 3 años a partir de la fecha de fabricación
- Método de esterilización: Vapor
- Diseñado para esterilización por Vapor a 134°C – 3.5 minutos.
- PRESENTACIÓN: Caja master 30 unidades
- ORIGEN: China
- VIRAJE: De azul a negro – De amarillo a negro.



## Recomendaciones de uso

Cada paquete tiene en su interior, al centro, una hoja impresa con indicador químico en base a agua, no tóxico. El color uniforme luego del proceso de esterilización por vapor, señala que el aire fue removido completamente en la cámara y reemplazado por vapor.

La parte posterior de la hoja con indicador, cuenta con campos para ser llenados y mantenidos como registro permanente para propósitos de trazabilidad.

## Almacenamiento y precauciones

A temperatura ambiente. Mantener lejos de la luz solar y separar de techos y paredes.

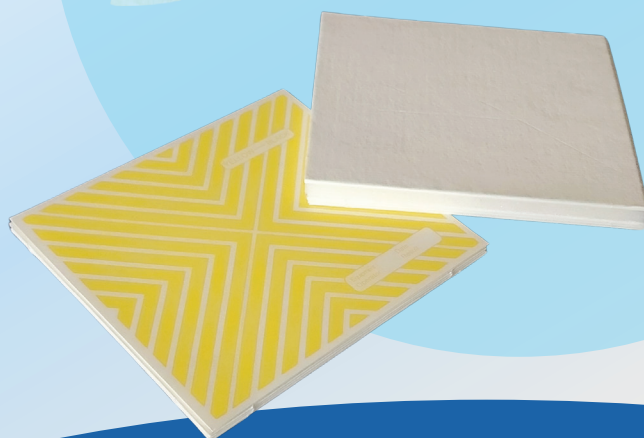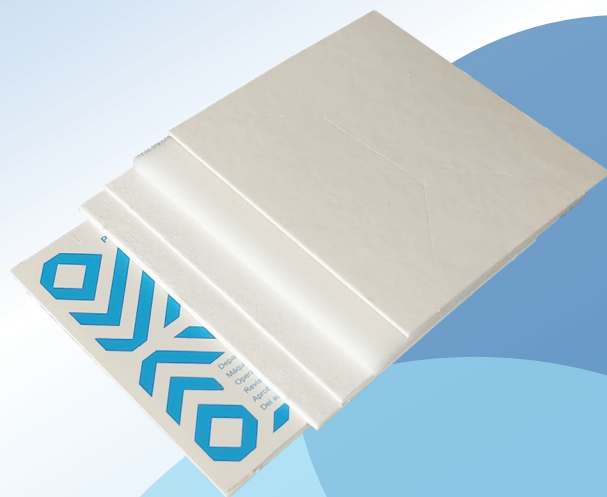

Marca: Silpak  
Producto libre de látex.

**ISO 13485:2016, CE, ISO 9001.**

✉ [fbarrera@silpak.cl](mailto:fbarrera@silpak.cl)

☎ +56 9 3227 7631

🏠 [www.silpakmed.cl](http://www.silpakmed.cl)

📍 Parinacota 381, Módulo 11, Quilicura, Santiago de Chile.